

Дякуємо Вам за те, що Ви обрали електричну зубну щітку Oral-B. Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед тим, як почати користуватися цією щіткою.

ВАЖЛИВО

- Периодично перевіряйте шнур електро живлення на наявність пошкодження.
- У випадку виявлення пошкоджень, віднесіть зарядний пристрій в сервісний центр Oral-B Україна.
- Не використовуйте пошкоджений або непрацюючий пристрій. Це може привести до загорання, ураження електричним струмом або інших пошкоджень.
- Цей продукт не призначений для дітей до 3-х років. Діти від 3 до 14 років та особи з обмеженими фізичними або розумовими здібностями чи без належного досвіду можуть використовувати зубну щітку під контролем осіб, відповідальних за їх загальну безпеку, або після інструктування з питань використання і заходам безпеки.
- Діти не повинні чистити та розбирати зубну щітку.
- Не іграшкі!
- Використовуйте даний пристрій тільки за призначенням, як описано в даному керівництві. Не використовуйте запасні або додаткові деталі, які не рекомендовані компанією-виробником.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- Якщо зупинить щітку впустіти, насадка повинна бути замінена перед наступним використанням, навіть якщо немає видимих пошкоджень.
- Не занурюйте зарядний пристрій у воду або іншу рідину.
- Не рекомендується розміщувати або зберігати зарядний пристрій в місцях, звідки пристрій може впасти в раковину або ванну. Не намагайтесь дистанціонно зарядити пристрій, що впав у воду. Негайніо відключіть його від електромережі.
- Не розбирайте даний пристрій самостійно, за винятком випадків заміни акумулятора. При заміні акумулятора дійте обережно, намагаючись не замкнути позитивний (+) і негативний (-) контакти.
- Під час відключення пристрію від електромережі, завжди тримайтеться за штекер, а не за сам шнур. Не торкайтесь штекера шнура електро живлення вологими руками. Це може привести до ураження електричним струмом.
- Якщо ви проходите стоматологічне лікування, проконсультуйтесь з Вашим лікарем-стоматологом перед початком використання даної зубної щітки.

Опис та комплектність

- a Змінна насадка
- b Датчик тиску
- c Кнопка вимикання/вимикання
- d Рукоятка
- e Індикатор зарядки
- f Індикатор низького рівня зарядки
- g Зарядний пристрій
- h Тримач для насадки (залежно від моделі)
- i Контенер для насадки із захисною кришкою (залежно від моделі)

Спеціфікація:

Спеціфікація електро живлення дів. на дні зарядного пристрію
Тип: 3757
Рівень шуму: <65 dB (A)

Приєднання і зарядка

Ручка Вашої зубної щітки водонепроникна, електрично безпечно і створена спеціально для використання у ванній кімнаті.

6

ДАТЧИК ТИСКУ

Для захисту Ваших зубів і ясен від надмірного навантаження, Ваша щітка має датчик тиску. Якщо Ви дуже сильно натискаєте на щітку, датчик тиску засвітлюється червоним (b), нагадуючи Вам, що потрібно зменшити тиск. (мал.3). Відчутсте і почуєте це. Периодично необхідно перевіряти функціонування датчика тиску, злегка натискаючи на голівку щітки під час використання.

Професійний таймер

Короткий переривчастий звук через кожні 30 секунд нагадує Вам про необхідність рівномірного чищення кожного квадранта порожнини роту (мал.4).

Більш довгий переривчастий звук сповіщає Вас про те, що з початку часу чищення прошло 2 хвилини (оптимальний час чищення, рекомендовані стоматологами). Пройдений час чищення фіксується будівлянням таймера навіть при короткосному вимиканні щітки (не більше 30 секунд) під час чищення. При паузі під час чищення понад 30 секунди, таймер обнуляється.

Змінні насадки

Oral-B пропонує Вам різноманітний вибір змінних насадок і аксесуарів для електричних зубних щіток Oral-B.

Насадка Oral-B Precision Clean –

 завдяки своїй чашкоподібній формі охоплює і чистить кожний зуб з усіх боків, у той же час, забезпечуючи ефективне видалення нальоту між зубами.

Насадка Oral-B Sensitive –

 Складається з м'яких щетинок, які дбайливо чистять Ваші зуби і ясина.

Насадка Oral-B TriZone –

 Ефект потрійного чищення для бездоганного видалення нальоту навіть між зубами.

У всіх насадок є блакитні щетинки INDICATOR® для того, щоб допомогти Вам довідатися про час, коли вам необхідно замінити насадку. При щоденному ретельному чищенні зубів дівні на день по 2 хвилини, блакитні щетинки поступово зневаряються протягом 3 місяців, у такий спосіб інформуючи вас про необхідність заміни насадки. Якщо щетинки зношуються до того, що втратили колір, це означає, що Ви занедбаєте тиснення на щітку при чищенні (мал.1).

Ми не рекомендуємо використовувати насадки Oral-B FlossAction або Oral-B 3D White, якщо ви носите брекети. Ви можете використовувати насадку Oral-B Ortho, спеціально розроблену для чищення навколо ортодонтичних конструкцій.

Рекомендації із чищення виробу

Після використання голівку щітки слід промити під струменем води при увімкненні рукояті протягом декількох секунд. Вимкніть щітку і зніміть насадку. Промініте всі частини окрім під струменем води, потім витріть їх насухо перед тим, як Ви знову зберете щітку. Від'єднайте зарядний пристрій від щітки перед чищенням. Рукоятку щітки можна мити в посудомийній машині. У юхдному разі не поміщайте зарядний пристрій у посудомийну машину або у воду. Тримач для насадок слід періодично витирати вологу тканиною (мал.1).

Виробник залишає за собою право вносити зміни без попереднього повідомлення.

8

Захист довкілля

Цей продукт містить акумулятор. На користь захисту довкілля, не викидайте його разом з домашнім сміттям після закінчення служби. Утилізація може бути здійснена у сервісному центрі ORAL-B Braus або відповідно до вимог країни.

**Гарантійні зобов'язання виробника**

Для всіх виробів ми дамо гарантію на два роки, починаючи з моменту придбання виробу або з дати його виробництва, у разі відсутності або неналежного оформлення гарантійного талону на вироб.

Протягом гарантійного періоду ми безкоштовно усважуємо шляхом ремонту, заміні деталей або заміни всього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньо якістю матеріалів або складання.

У випадку неможливості ремонту в гарантійний період вироб може бути замінений на новий або аналогічний відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

Гарантія набуває сили лише, якщо дата купівлі підтверджується печаткою та підписом дилера (магазину) на гарантійному талоні або на останній сторінці оригінальної інструкції з експлуатації Braun, яка також може бути гарантійним талоном. Ця гарантія діється у будь-якій країні, в яку цей вироб постачається представником компанії виробника або призначеним дистрибутором, та де жодні обмеження з импорту або інші правові положення не перевищують наданню гарантійного обслуговування.

Гарантія на замінені частини закінчується в момент закінчення гарантії на даний виріб.

Гарантія не стосується таких випадків: ушкодження, викликані неправильним використанням, нормальне зношення деталей (напр., сточка для гоління або ріжучого блока), дефекти, що мають незначний вплив на якість роботи пристрію. Ця гарантія втрачає силу, якщо ремонт здійснюється не вповніваженою для цього особою та, якщо використовуються не оригінальні запасні частини виробника.

Строк служби продукції Braun дорівнює гарантійному періоду у два роки з моменту придбання або з моменту виготовлення, якщо дату продажу неможливо встановити.

У випадку передявлення reklamaciї за умовами даної гарантії, передайте виріб у повному комплекті згідно опису в оригінальній інструкції з експлуатації разом з гарантійним талоном у будь-який сервісний центр, який офіційно вповноважений представником компанії виробника. Всі інші вимоги, разом з вимогами відокремлення битків, не дійсні, якщо наша відповідальність не встановлена законом чином.

Випадки, на які не розповсюджується гарантія:

- дефекти, викликані форс-мажорними обставинами;
- використання з професійною метою або з метою отримання прибутку;
- порушення вимог інструкції з експлуатації;
- невірне встановлення напруги мережі живлення (якщо це вимагається);
- здійснення технічних змін;
- механічні пошкодження;
- для приладів, що працюють на батареїах - робота з неідеальними або спрацьованими батареїах, будь-якими пошкодженнями, викликаними спрацьованими або підіткуючими батареїах;
- пошкодження з вини тварин, гризуни та комах (в тому числі у випадках знаходження гризуни та комах усередині пристрію);
- для брітв - зм'ята або порвана сітка.

Чаява!

Гарантійний талон підлягає вилученню в разі звернення до сервісного центру з проханням про виконання гарантійного ремонту. Після проведення ремонту гарантійним талоном буде вважатися заповнений оригінал листа виконаного ремонту зі штампом сервісного центру та підписом споживачем про отримання виробу з ремонту. Гарантійний строк подовжується на термін, який даний виріб знаходить в сервісному центрі в ремонти.

В разі виникнення складнощів з виконанням гарантійного та після-гарантійного обслуговування прохання звертатися до інформаційної служби сервісного представника компанії виробника в Україні.

Телефон гарячої лінії 1 800 505 000. Дзвінки по Україні зі стаціонарних телефонів номерів є безкоштовними. Дзвінки з мобільних телефонів оплачуються згідно тарифів відповідного оператора.

Також можна отримати додаткову інформацію на сервісному порталі виробника в інтернеті www.service.braun.com

Обладнання відповідає Технічному регламенту обмеження використання якісних небезпеків речовин у електричному та електронному обладнанні.

Виготовлено: «Braun GmbH»,
Baumhoferstrasse 40,
DE-97828 Marktbeidenfeld, Germany
«Браун ГмбХ», Баумхофштрассе,
DE-97828 Марктбейденфельд, Німеччина



ТОВ «Проект енд Гембл Трейдінг Україна», Україна,
04070, м. Київ, вул. Набережно-Хрестатська, 5/13, корпус літ. А.
(0-800) 505-000.

Дата виготовлення вказана на щітці у наступному форматі: перша цифра = остання цифра року виготовлення, останні дві = порядковому номеру тижня у році.

Гарантія на змінні насадки і аксесуари

Гарантія Oral-B буде недійсна, якщо пошкодження електричної щітки Oral-B пов'язане з використанням змінних насадок і/або аксесуарів, не вироблених Oral-B.

Oral-B не рекомендує використання таких змінних насадок і/або аксесуарів:

• Oral-B не може контролювати якість змінних насадок і/або аксесуарів, не вироблених Oral-B. Таким чином, ми не можемо гарантувати ефективність чищення зубів з використанням таких змінних насадок і/або аксесуарів, про що споживач був проінформований під час покупки електричної щітки Oral-B.

• Oral-B не може забезпечити той факт, що змінні насадки і/або аксесуари, не вироблені Oral-B, підійдуть до електричної щітки Oral-B.

• Oral-B не може передбачити довгострокові наслідки заміни насадок і/або аксесуарів, не вироблені Oral-B.

• Всі змінні насадки і/або аксесуари, що використовуються на щітці Oral-B, повинні мати логотип Oral-B і відповідати високим стандартам якості Oral-B. Oral-B не продає змінні насадки і/або аксесуари під будь-яким іншим ім'ям або бренду, окрім Oral-B.

10

Oral-B® TRIZONE BRAUN
1000/2000/3000 Black

Электрическая зубная щетка

Oral-B Trizone 1000
с дорожным чехлом
Ограниченная серия

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU UA

The Oral-B Trizone 1000 electric toothbrush features three distinct zones of cleaning: interdental, surface, and deep clean. It has three brush heads included: Precision Clean, Sensitive, and TriZone. The brush head is removable and washable. The handle is ergonomic and includes a timer and pressure sensor. The product is designed for effective plaque removal and oral health maintenance.

Internet:
www.oralb.ru
www.oralb.ua

Произведено в Германии.
 «Braun GmbH», Frankfurter Str. 145, D-61476 Kronberg, Germany/Gермания.



Braun D20.513.1(Oral-B)black Tr.

Type 3757/Type 3657

96509268

7

9

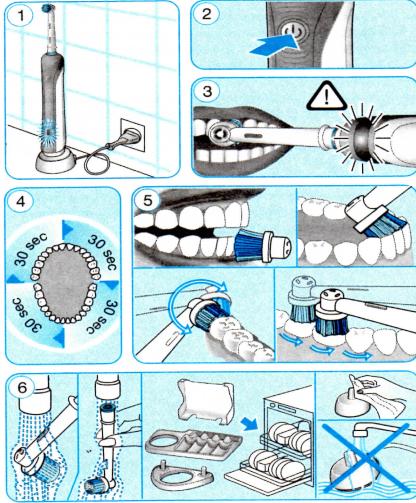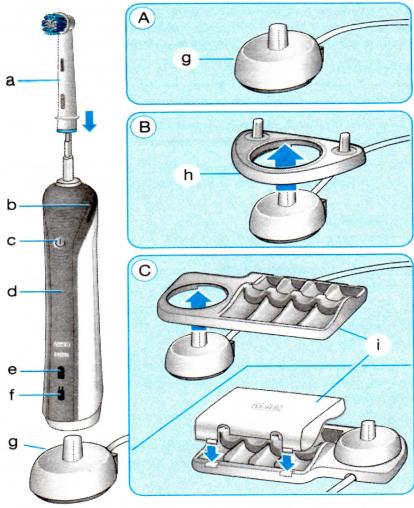

РУССКИЙ

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали электрическую зубную щетку Oral-B. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед тем, как начать пользоваться этой щеткой.

ВАЖНО

- Периодически проверяйте шнур электропитания на наличие повреждений. В случае наличия повреждений, отнесите зарядное устройство в сервисный центр Oral-B Braun. Не используйте поврежденное или неработающее устройство. Это может привести к возгоранию, поражению электрическим током и иным повреждениям.
- Данный продукт не предназначен для детей до 3-х лет. Дети от 3 до 14 лет и лица с ограниченными физическими или умственными способностями или с недостаточным опытом могут использовать зубную щетку под контролем лиц, отвечающих за их общую безопасность, либо после инструктирования по вопросам использования и мерам безопасности.
- Дети не должны чистить и разбирать зубную щетку.
- Не играйте.
- Используйте данное устройство только по назначению, как описано в данном руководстве. Не используйте запасные или дополнительные детали, не рекомендованные фирмой-изготовителем.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Если зубную щетку уронили, насадка должна быть заменена перед следующим использованием, даже если нет видимых повреждений.
- Не погружайте зарядное устройство в воду или иную жидкость. Не рекомендуется размещать или хранить зарядное устройство в местах, откуда устройство может упасть в раковину или ванну. Не пытайтесь достать упавшее в воду зарядное устройство. Немедленно отключите его от электропитания.
- Не разбирайте данное устройство самостоятельно, за исключением случаев замены аккумулятора. При замене аккумулятора, действуйте осторожно, стараясь не замкнуть положительный (+) и отрицательные (-) контакты.
- Во время отключения устройства от электропитания, всегда держитесь за штекер, а не за сам шнур.
- Не дотрагайтесь до штекера шнура электропитания влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.
- В случае если вы проходите стоматологическое лечение, проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом-стоматологом перед началом использования данной зубной щетки.

Использование

- Сменная насадка
- Датчик давления
- Кнопка включения/выключения
- Рукотка
- Индикатор зарядки
- Индикатор низкого уровня зарядки
- Зарядное устройство
- Держатель для насадки (в зависимости от модели)
- Контейнер для насадок с защитной крышкой (в зависимости от модели)

Спецификация:

Спецификацию электропитания см. на дне зарядного устройства

Тип: 3757

Уровень шума: <65 дБ (A)

Подсоединение и зарядка

Ручка вашей зубной щетки водонепроницаема, электрически безопасна и создана специально для использования в ванной комнате.

- Включите основное (g) или сборное зарядное устройство (рис. В/С) в электрическую розетку и поставьте рукоятку (d) на зарядное устройство.
- Зеленый индикатор зарядки (e) мигает, пока ручка заряжается. Когда ручка будет полностью заряжена, зеленый индикатор зарядки будет гореть непрерывно в течение 5 секунд и затем погаснет. После полной зарядки аккумулятора хватает примерно на 7 дней регулярной чистки зубов (два раза в день, по 2 минуты) до его полной разрядки (рис. 1).
- При низком уровне зарядки аккумулятора загорится красный индикатор (e), он начнет мигать после выключения устройства.
- При ежедневном использовании щетки вы можете хранить рукоятку на зарядном устройстве, чтобы поддерживать полный уровень зарядки щетки. Переезда из аккумулятора невозможна. Однако в целях защиты окружающей среды, Oral-B рекомендует вам отключить зарядное устройство от электропитания до того момента, когда понадобиться следующая подзарядка аккумулятора.
- Для того чтобы поддерживать максимальную емкость аккумуляторной батареи, не реже 1 раза в 6 месяцев отключайте зарядное устройство от сети и используйте щетку регулярно до ее полной разрядки.

Важно: Если индикатор заряда не загорелся сразу, продолжайте зарядку, индикатор снова начнет мигать через 10–15 минут.

Использование электрической зубной щетки

Техника чистки

Намочите головку зубной щетки и нанесите на нее зубную пасту. Чтобы избежать разбрызгивания, поднесите щетку к зубам, а затем включите ее (рис.2). Медленно перемещайте щетку от одного зуба к другому, задерживаясь на поверхности каждого зуба несколько секунд.

Если Вы используете насадку TriZone поместите головку зубной щетки и щетинки под небольшим углом к линии десен. Слегка надавите и чистите зубы быстрыми движениями, так как Вы это делаете мануальной зубной щеткой. При любой насадке начинайте чистить сначала снаружи, а затем внутри. На заключительном этапе почистите жевательные поверхности зубов.

Чистка каждого из 4-х квадрантов рта должна занимать равное количество времени. Вы можете также проконсультироваться с вашим стоматологом о том, какая техника чистки Вам больше подходит (рис.5).

В течение первых дней использования щетки десны могут кровоточить. Это должно прекратиться через 2 недели. Если кровоточивость сохраняется более двух недель обратитесь к стоматологу. Если у Вас чувствительные зубы и десны, рекомендуется использовать режим «Чувствительный» (в зависимости от модели).

Режимы чистки (в зависимости от модели)

- «Ежедневная Чистка» – подходит для ежедневной чистки
- «Чувствительный» – аккуратная, но щадящая чистка для чувствительных зон
- «Отбеливание» – исключительное качество полировки и отбеливания для ежедневного или приуроченного к определенным случаям использования.

Как переключить режим:

- Нажмите кнопку включения/выключения (c), и Ваша щетка автоматически включит режим «Ежедневная чистка».
- Для переключения в режимы «Чувствительный» и «Отбеливание», последовательно нажмите кнопку включения/выключения несколько раз подряд.
- Чтобы отключить режим «Отбеливание», нажмите кнопку включения/выключения еще раз.
- Чтобы выключить щетку из режима «Ежедневная чистка» или «Чувствительный», нажмите кнопку включения/выключения и удерживайте до тех пор, пока она не остановит работу.

2

Датчик давления

Для защиты Ваших зубов и десен от чрезмерной нагрузки, Ваша щетка имеет датчик давления. Если Вы слишком сильно нажимаете на щетку, датчик давления загорается красным (b), напоминая Вам, что нужно уменьшить давление (рис.3). Вы почувствуете и услышите это.

Периодически необходимо проверять функционирование датчика давления, слегка нажимая на головку щетки во время использования.

Профессиональный таймер

Короткий прерывающийся звук через каждые 30 секунд напоминает Вам о необходимости равномерной чистки каждого квадранта полости рта (рис.4). Более долгий прерывающийся звук информирует вас о том, что с начала временной чистки прошло 2 минуты (оптимальное время чистки, рекомендованное стоматологами). Пройденное время чистки фиксируется встроенным таймером даже при кратковременном отключении щетки (не более 30 секунд) во время чистки. При паузе во время чистки свыше 30 секунд, таймер обнуляется.

Сменные насадки

Oral-B предлагает Вам разнообразный выбор сменных насадок и аксессуаров для электрических зубных щеток Oral-B.

Насадка Oral-B Precision Clean –

благодаря своей чащевидной форме охватывает и чистит каждый зуб со всех сторон, в то же время, обеспечивая эффективное удаление налета между зубами.

Насадка Oral-B Sensitive –

Состоит из мягких щетинок, которые бережно чистят Ваши зубы и десны.

Насадка Oral-B TriZone –

Эффект тройной чистки – для безупречного удаления налета даже между зубами.

У всех насадок есть голубые щетинки INDICATOR® для того, чтобы помочь Вам узнать о времени, когда Вам необходимо заменить насадку. При ежедневной щадящей чистке зубов дважды в день по 2 минуты, голубые щетинки постепенно обесцвечиваются в течение 3 месяцев, таким образом информируя вас о необходимости замены насадки. Если щетинки изнашиваются до того, как потеряют цвет, значит, Вы слишком сильно давите на щетку при чистке (рис.1).

Мы не рекомендуем использовать насадки Oral-B FlossAction или Oral-B 3D White, если у вас есть брекеты. Вы можете использовать насадку Oral-B Ortho, специально разработанную для чистки вокруг ортодонтических конструкций.

Рекомендации по чистке изделия

После использования головку щетки следует промыть под струей воды при включенной рукоятке в течение нескольких секунд. Выключите щетку и снимите насадку. Промойте все части отдельной под струей воды, затем вытрите их насухо перед тем, как вы снова соберете щетку. Отсоедините зарядное устройство от щетки перед чисткой. Рукоятку щетки можно мыть в посудомоечной машине. Ни в коем случае не помещайте зарядное устройство в посудомоечную машину или в воду. Держатель для насадок следует периодически вытирать влажной тканью (рис.6).

В изделие могут быть внесены изменения без уведомления.

Защита окружающей среды

Данный продукт содержит аккумулятор. В интересах защиты окружающей среды, не выбрасывайте его вместе с домашним мусором после окончания службы. Утилизация может быть произведена в сервисном центре Oral-B Braun или в соответствующем пункте утилизации в вашей стране.



Гарантия

На данное изделие распространяется гарантия в течение 2 лет с момента покупки.

В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материала или сборки.

В случае невозможности ремонта в гарантийный период изделие может быть заменено на новое или аналогичное в соответствии с Законом о защите прав потребителей. Гарантия обретает силу только, если данное изделие подтверждается печатью и подписью дилера (магазина) на последней странице оригинальной инструкции по эксплуатации Braun, которая является гарантинным талоном. Данные гарантинные обязательства действуют во всем мире, где изделие распространяется самой компанией Braun или ее компанией дистрибутором, и где никакие ограничения по времени или условиям гарантийного обслуживания не влияют на дату истечения срока гарантии. Гарантия на замененные части истекает в момент истечения гарантии на данное изделие.

Данная гарантia не распространяется на случаи повреждения или поломки изделия в результате неправильного использования (см. список ниже), естественного износа, особенно в отношении насадок для рукоятки щетки, а также дефектов изделия не имеющих эффекта для функционирования данного устройства. Гарантия не является действительной в случае ремонта изделия не авторизованными сервисными службами и в случае неиспользования оригинальных запасных частей Braun.

Для осуществления гарантинного обслуживания, передайте данное изделие в авторизованный сервисный центр Oral-B Braun вместе с чеком, подтверждающим покупку изделия,

Все другие требования, включая требования возвращения убытков, исключаются, если наши ответственность не установлена в законном порядке. Рекламации, связанные с коммерческим контрактом с продавцом, не попадают под эту гарантю. В соответствии с законом РФ № 2300-1 от 7.02.1992 г. «О защите прав потребителей» и принятым дополнением к закону РФ от 9.01.1996 г. «О внесении изменений и дополнений в закон «О защите прав потребителей» и «Кодекс РСФСР об административных нарушениях», фирма Oral-B Braun устанавливает срок службы на свои изделия равный двум годам с момента производства, если дата продажи установлена в соответствии с Российским законом.

Случаи, на которые гарантia не распространяется:

- дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;
- использование в профессиональных целях;
- нарушение требований инструкции по эксплуатации;
- неправильная установка напряжения питания (если это требуется);

4

- внесение технических изменений;

- механические повреждения;
- повреждения по вине животных, грызунов и насекомых (в том числе случаи находки грызунов и насекомых в неподходящих местах);
- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батареями, любые повреждения, вызванные испoщеными или текущими батареями (советуем пользоваться только предохранителями для прокладки батареек).

Внимание!

Оригинальный Гарантинный Талон подлежит изъятию при обращении в сервисный центр для гарантинного ремонта. После проведения ремонта Гарантинный Талон будет являться заполненным оригинал Листа выполнения ремонта со штампом сервисного центра и подписанный потребителем по получении изделия из ремонта. Требуйте проставления даты возврата из ремонта, срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре.

В случае возникновения сложностей с выполнением гарантинного и послегарантинного обслуживания просим сообщать об этом в Информационную Службу Сервиса Oral-B Braun по телефону 8-800-200-20-20. Данная гарантia не влияет на Ваши права, установленные законом.

Товар сертифицирован

Сделано в Германии, Браун ГмбХ
Braun GmbH Werk MarktHeidenfeld,
Baumhofstr. 40, 9728 MarktHeidenfeld, Germany



RU:

Импортер/Служба потребителей:
ООО «Проект Энд Гэмбл»
Дистрибуторская Компания;
125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 2,
Тел. 8-800-200-20-20

BY:

Импортер в Республике Беларусь:
ООО «ЭлектроСервис»,
220012, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Чернышевского, 10А, к. 412АЗ.

Служба потребителей: РБ: Минск, 220030, а/я 211.

Гарантia на сменные насадки:

Гарантia Oral-B не является недействительной, если повреждение электрической щетки Oral-B связано с использованием сменных насадок и / или аксессуаров, не произведенных Oral-B.

Oral-B не рекомендует использование таких сменных насадок и / или аксессуаров.

- Oral-B не может контролировать качество сменных насадок и / или аксессуаров, не произведенных Oral-B. Таким образом, мы не можем гарантировать эффективность чистки зубов с использованием таких сменных насадок и / или аксессуаров, о чем потребитель был проинформирован во время покупки электрической щетки Oral-B.
- Oral-B не может обеспечить тот факт, что сменные насадки и / или аксессуары, не произведенные Oral-B, подходят к электрической щетке Oral-B.
- Oral-B не может предсказать долгосрочные последствия использования насадок и / или аксессуаров на ручке или головке щетки на насадки и / или аксессуары, не произведенные Oral-B.

Все сменные насадки и / или аксессуары, использующиеся на щетке Oral-B, должны иметь логотип Oral-B и отвечать высоким стандартам качества Oral-B. Oral-B не продает сменные насадки и / или аксессуары под любым другим именем или брендом, кроме Oral-B.

5

3